



Tel.: 91 711 45 08

**DENTAL ARROYO
SELECDENT**

www.arroyoselecdent.com



Ofertas válidas hasta
el 30 de septiembre,
salvo cambios
imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días



PROTOCOLO BLANQUEAMIENTO

1A.- Nunca decir al paciente que le va a hacer un blanqueamiento, sino un aclaramiento porque sino siempre van a estar insatisfechos. Si los quiere blancos, carillas. Hacer foto previa y posterior, porque a veces dicen que ha blanqueado poco.



Antes

Despues



Antes

Despues

1B.- Exploración previa, por si hay obturaciones en anteriores, fisuras, **fluorosis ocultas**, colores desiguales, etc.

2.- Prevenir o tratar la sensibilidad previa y posterior, tanto domiciliario como clínico.

3.- Recomendamos tratamiento combinado, empezando por el de casa. Una vez rota la cadena de cromóforos terminar con el de clínica, **mejora mucho el resultado y la duración** del blanqueamiento.

4.- Al terminar el de clínica, aplicar un remineralizante con nanohidroxiapatita y a continuación poner un sellador profesional. Evitará que entre el café, té, paella, tabaco, etc...y que venga al poco tiempo diciendo que le ha durado poco o peor.

5.- Todos los pacientes quieren los dientes más blancos, si se hace bien, **dará un servicio más y aumentará su facturación.**

6.- Podemos proporcionar el tratamiento combinado completo. Costo aproximado de unos **29 € por paciente** según la oferta.

CONSULTENOS

Tfno.: 91 711 45 08

info@arroyoseleccion.com

WhatsApp: 676 17 04 78

DESENSIBILIZANTE KF

Concentración al 0,2 % o al 2%

- 
- Previene la hiperestesia.
 - Elimina la sensibilidad previa al blanqueamiento, sin interferir.
 - Aplicar desde dos semanas antes.
 - Aplicar 10 minutos antes (durante y después del blanqueamiento).
 - 5 Minutos de contacto con la boca abierta.
 - Hidrata-PH casi neutro

Doble acción

Desensibilizante (nitrato potásico)

Remineralizante (floruro de sodio)

3-4 horas por noche

17,01 € unidad (OFERTA 3+2)

10,20 € por caja



WHITENESS PERFECT

Peróxido de carbamida al 10 % y 16 % para
blanqueamiento en casa

Whiteness Perfect

¡En 2024 **no**
podría ser
diferente!

5X
GALARDONADO
MEJOR BLANQUEADOR
CASERO EN EEUU



Sin reservorio.
Muy tixotrópico.
Se aspira mejor.

Kit 5 jeringas (15gr)
2 planchas férulas
+ portaférulas + puntas

66,64 €

1 jeringa 13,33 €



1 jer.
10 €

Jeringa de 3 gramos

Dura entre 12 y 15 días

Hidrata y PH casi neutro



20%
DTO.

~~PVP 454,39 €~~

OFERTA 362,33 €

Jeringa 7,25 €

Kit 50 jer.





WHITENESS HP AUTOMIX

35 % peróxido de hidrógeno (uso clínico)



- **Evita la sensibilidad, producida por las lámparas de uso profesional.**
- Neutraliza la posible quemadura.
- Dientes más hidratados, PH neutro, no desmineraliza
- Remineraliza, reduciendo sensibilidad.

Dos pases de 15 minutos, o tres pases de 8 minutos en una sola sesión, aclarando entre pases.

Kit 5 g de HP AUTOMIX

- 1 jeringa de whiteness hp automix con 5g
- 5 puntas automezcla
- 1 jeringa de top dam con 2g.
- 1 frasco de solución neutralize con 2g (neutralizador de peróxido)



No cambia de color, mejor control

Si se aplica pincelando en lugar de con la punta, pueden salir más casos
(15 € paciente)

Jeringa 5gr a 83,63 €
31 € paciente





BLANQUEADOR
DE CONSULTORIO



Whiteness Super-endo

Blanqueador a base de peróxido de carbamida al 37%, indicado como apósito de acción prolongada para el aclaramiento interno de dientes desvitalizados.

- 👉 **Aplicación directa desde la jeringa:** el producto viene en la jeringa en formato de gel y listo para uso, no necesitando espátulación, facilitando así el procedimiento.
- Ⓢ **Excelente relación costo-beneficio:** promedio 70 aplicaciones.
- 🦷 **Excelente viscosidad:** forma una pasta de consistencia ideal para ser aplicada en la cámara pulpar sin el inconveniente de escurrir y dificultar el proceso de sellado provisional del diente.



Autora: Dra. Malil Borromeo

Kit

Contenido: 1 jeringa con 3 g de gel y puntas.





WHITENESS SUPER-ENDO

Indicaciones

Aclaramiento de dientes no vitales por medio de la aplicación y mantenimiento en el interior de la cámara pulpar (técnica walking bleach).

Debe ser realizada una criteriosa evaluación del tratamiento endodóntico, si existe estructura coronaria suficiente para el aclaramiento dental y la ausencia de restauraciones amplias en el diente a ser aclarado.



PASOS

- 1) Registrar color de diente a ser aclarado a través de una escala de color y/o fotografía antes de inicial el tratamiento.
- 2) Realizar una adecuada apertura de la cámara pulpar y limpiar completamente, removiendo todo el material restaurador.
- 3) Remover 3 mm de material obturador del conducto radicular y hacer sellado cervical (aproximadamente a 2 mm del margen cervical) con el objetivo de evitar que el aclarador pase hacia el periodonto.
- 4) Aplicar Whiteness Super-Endo en el interior de la cámara pulpar, preparar una pequeña bolita achatada de algodón y ponerla en la cavidad sobre el aclarador. A continuación, sellar la cavidad con ionómero de vidrio. Verificar la oclusión del paciente con movimientos de protrusión y lateralidad. El contacto prematuro puede fracturar la restauración provisional y/o el diente.
- 5) Evaluar el caso a los 4 días. Si es necesario repetir aplicación.



Tel.: 91 711 45 08

**DENTAL ARROYO
SELECCION**



www.arroyoseleccion.com

Para blanqueamiento interno **diseñado para tratar dientes no vitales** con oscurecimiento por necrosis pulpar, traumatismos o tratamientos endodónticos.

Formulado con **peróxido de carbamida al 37%**, combina **alta eficacia blanqueadora** con un **perfil seguro** para su uso en la técnica de blanqueamiento intracameral ambulatorio.

características:

- **Peróxido de carbamida al 37%:** libera oxígeno de forma gradual, favoreciendo un blanqueamiento controlado y efectivo.
- **Fácil aplicación:** gel listo para usar, sin necesidad de mezclas.
- **Consistencia ideal** para colocación intracoronaria.
- **Menor riesgo** de reabsorción cervical.
- **Uso ambulatorio:** indicado para sesiones supervisadas en clínica.

AQUAFLUOR



**Sellador desensibilizante
de uso profesional**

59€

10 ml

Barniz-resina de
fluoruro de sodio
Aplicación única

- ✓ **Evita incrustaciones de restos de café, vino, tabaco,...los blanqueamientos duran más.**
- ✓ No amarillea los dientes.
- ✓ Pueden comer a los 15 minutos.
- ✓ Efecto inmediato y duradero.
- ✓ Se seca con aire.



Caries de
cuello



Cavidades



Tallados

- **Prevención de caries en ortodoncia.**
- Protección de caries en adultos y niños.

WHITENESS RM

Removedor de manchas
“Peeling” dental

Facilita la penetración de otros productos

ICON, remineralización,
adhesivos, flúor, blanqueamientos (aplicar 10 minutos
antes del blanqueamiento en clínica)



Mancha Blanca

Microabrasión en
manchas blancas



Microabrasión
Remineralización

Remineralización



WHITENESS RM
Ácido clorhídrico al
6% y carburo de
silicio.

Fluorosis



Mejor limpieza

~~44,54 €~~

40,09 €



Litio + Ácido clorhídrico al 6%

Ver video



https://www.youtube.com/watch?v=cBIWyT8_RKE



ADHESIVO AMBAR APS



6 ml

El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina



Adhesión más
duradera

Para todos los composites

No cambia el color
de las carillas

Sale una gota,
no echa de más



No afecta al color del bracket cerámico

390 gotas 59,24€

+ 6 jerin. ácido fosforic. 37 % gratis





ADHESIVO AMBAR APS UNIVERSAL

Grabado ácido total y
**autograbante en esmalte
y dentina**

El único que no amarillea

Ideal con humedad,
próxima a encía y dentina

Para todos los composites



5 ml



**Sale una gota,
no echa de más**

Adhesión más
duradera



~~PVP 81,87 €~~

OFERTA 63,04 €



**No cambia el color
de las carillas**

Kit

Vittra Unique

+

Ambar Universal

~~120,74 €~~

Oferta 84,52 €





DENTAL ARROYO
SELECCION



Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com

COMPOSITE VITTRA

Carillas de composite




Tapa
flit-top



Capas finas de 2 mm
polimerizar 50 seg

Carga submicrométrica de 200 nm
75% de carga inorgánica

Los fotoiniciadores
(canforoquinona)
convencionales
amarillean

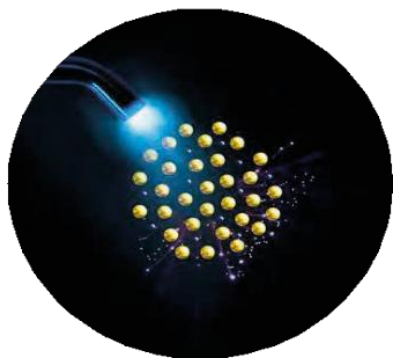

No se
pega ni
cuartea

Con tecnología
aps, más
profundidad sin
amarillear



Libre de
Bisfenol A

Pincelable

Tiempo de trabajo de
5 a 7 minutos

Evita
transparencias del
metal

Alto brillo
y
resistencia

Aps sistema de
polimerización
avanzada

No cambia el
color después
de fraguar

**Fluorescencia
natural
NO BIS GMA**



**DENTAL ARROYO
SELECCION**

Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com



Colores a elegir en la oferta

**Partículas esferoidales de silicato de zirconio
Con mejor relleno, pulido y reflexión de la luz**

Vittra jeringas 2gr

DAO-DA5-VM-VH-TRANS-
OPL-TRANS,N

~~PVP 37,59 €~~

OFERTA 28,19 €

Vittra jeringa 4 gr

DA1-DA2-DA3- DA3,5- EA1-
EA2-EA3-EB1- EBLEACH

~~PVP 48,46€~~

OFERTA 36,35 €



Vittra^{1/4S}
Light-curing premium composite

Cápsulas

20 cápsulas de 0,2 gramos

DA1-DA2-DA3-DA3,5-EA1-EA2-EA3-
EB1-EBLEACH-DAO-DA4-VM-VH-
TRANS OPL-TRANS N

~~PVP 53,31 €~~

OFERTA 39,99 €



Kit essential

4 gr – DA1 – DA2 – DA3 – EA1 –
EA2 – AMBAR APS Y CONDAC 37

2 gr – TRANS N - AMBAR APS y
CONDAC 37

~~PVP 258,21€~~


OFERTA 206,56 €






PREVDENT DESENSIDENT

Desensibilizante y remineralización

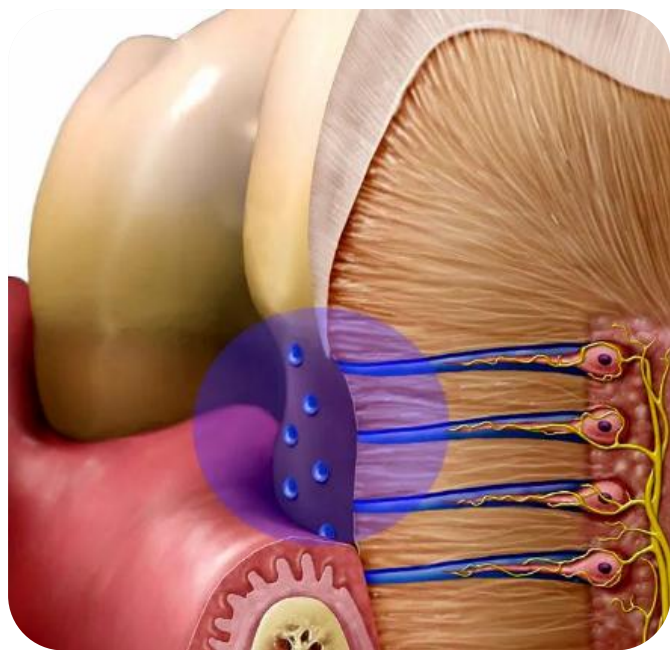

KIT
28€

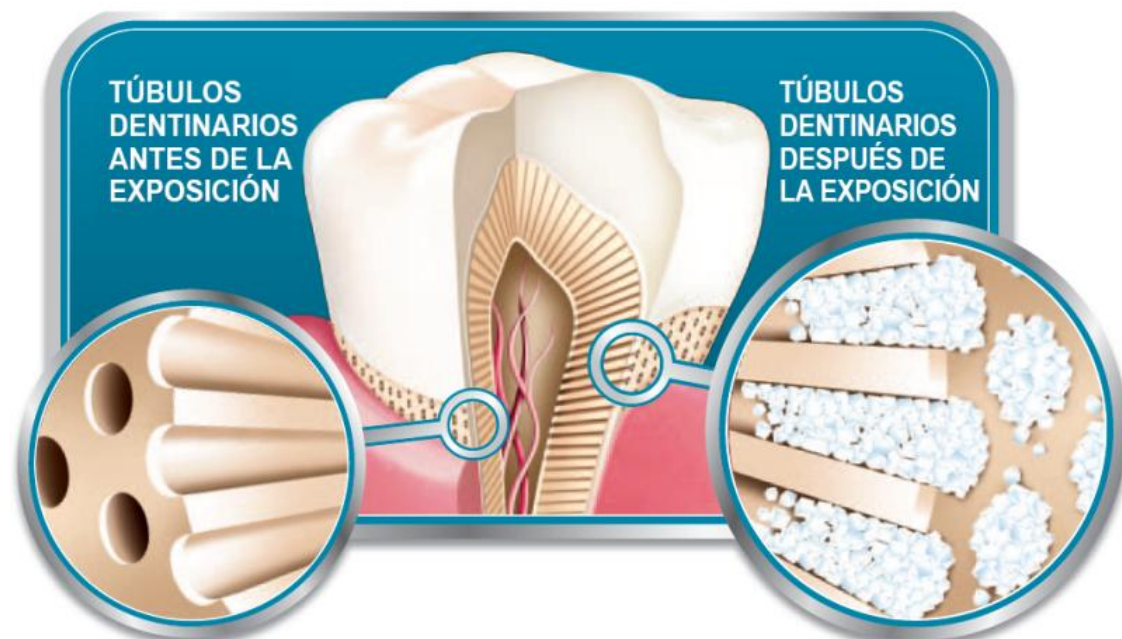

Cavidades



Tallados



Kit inicio paciente

- nanohidroxiapatita suero dental (30ml)
- 4 esponjitas de 1 ml de nanohidroxiapatita

PREVDENT ESPONJITAS HIDROXIAPATITA

Es la versión más pura de hidroxiapatita
permite remineralizar el esmalte dental
a nivel nanoscópico



Aplicar una cada dos días



PVP
3,50 € esponja

OFERTA
1,95 € esponja



Hidroxiapatita:
esmalte 97%,
dentina 65%

POST-TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Prevdent pasta dental de nanohidroxiapatita



- ✓ Combinación única de nano-hidroxiapatita y xilitol
- ✓ La bacteria responsable de causar caries, no puede digerir el xilitol y muere
- ✓ Dificulta la aparición de placa bacteriana

10,70€

Este producto no existe ni en farmacias
ni en supermercados, debe
proporcionarlo la clínica



TOP DAM

Protector gingival

- **Protección de filtraciones** de ácido a través de la junta del dique
- No irrita los tejidos gingivales
- Excelente poder de sellado



Jeringa de 2 gramos azul

Resina fotocurable
que sustituye al dique
de goma

29,07 € UNIDAD
OFERTA 3+1

ABREBOCAS ARCFLEX

Aleja los labios y
lengua y expone
los arcos
dentales de forma
cómoda y segura



OFERTA 11,99 €



- Retractor labial (o abre boca).
- Protección para lengua.
- Descanso de mordida.
- Extremamente confortable y seguro.
- Autoclavable.

Desmontable para facilitar la desinfección y esterilización

Deformable para disminuir su tamaño



PLANCHAS MOUTHGUARD

Planchas termoplásticas

Blanqueamientos y fluorización

Transparentes **flexibles**



12 unidades

1 mm a 13 €

1,5 mm a 15 €

2 mm a 19 €

PLANCHAS CLEAR

Ortodoncia y férulas de descarga

rígidas



25 unidades

1 mm a 17,80 €

1,5 mm a 24 €

2 mm a 31,50 €

PLANCHAS CLEAR 120 3mm

Blanqueamiento, fluorización,
ortodoncia

azules rígidos



12 unidades

35€

MÉTODO ICON

Tratamiento de resina tegma **infiltrada** para
restauración y **minimamente invasiva**

No reconstruye

En una sesión, sin fresas, sin anestesia y sin dolor


Trietilenglicoldimetacrito



Fluorosis marrón



o blanca

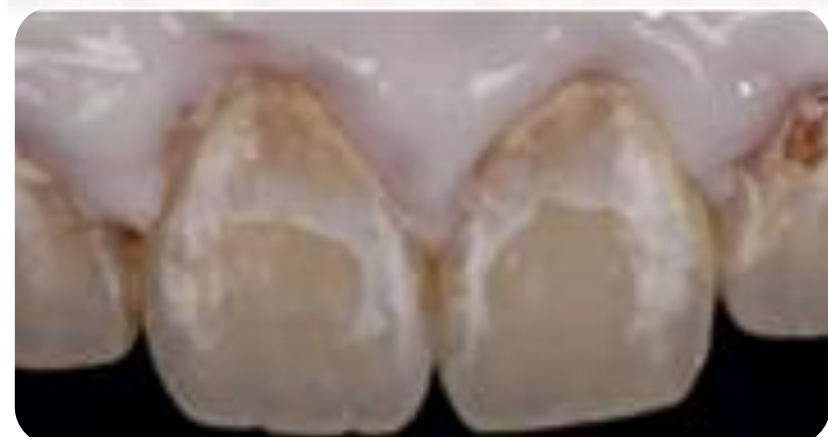

Manchas blancas



Traumatismos



ANTES



DESPUÉS

Hipomineralización incisivo molar

- Cuellos sensibles
- Preserva la estructura dental sana
- En una sola sesión



DENTAL ARROYO
SELECCION

Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com



PROTOCOLO ICON



Mancha blanca



Aislamiento



Clorhidrico 15%
2 min, hasta 3 veces



Aplicar etanol

Aplicar RM,
mejora la
penetración
y el resultado



3' antes de
polimerizar


Sin luz del equipo
*Quitar sobrante con gasa o algodón,
pasar hilo dental, polimerizar 40 seg.,
pulir, poner otra capa 1 min.,
polimerizar y pulir*



PULIR



RESULTADO FINAL

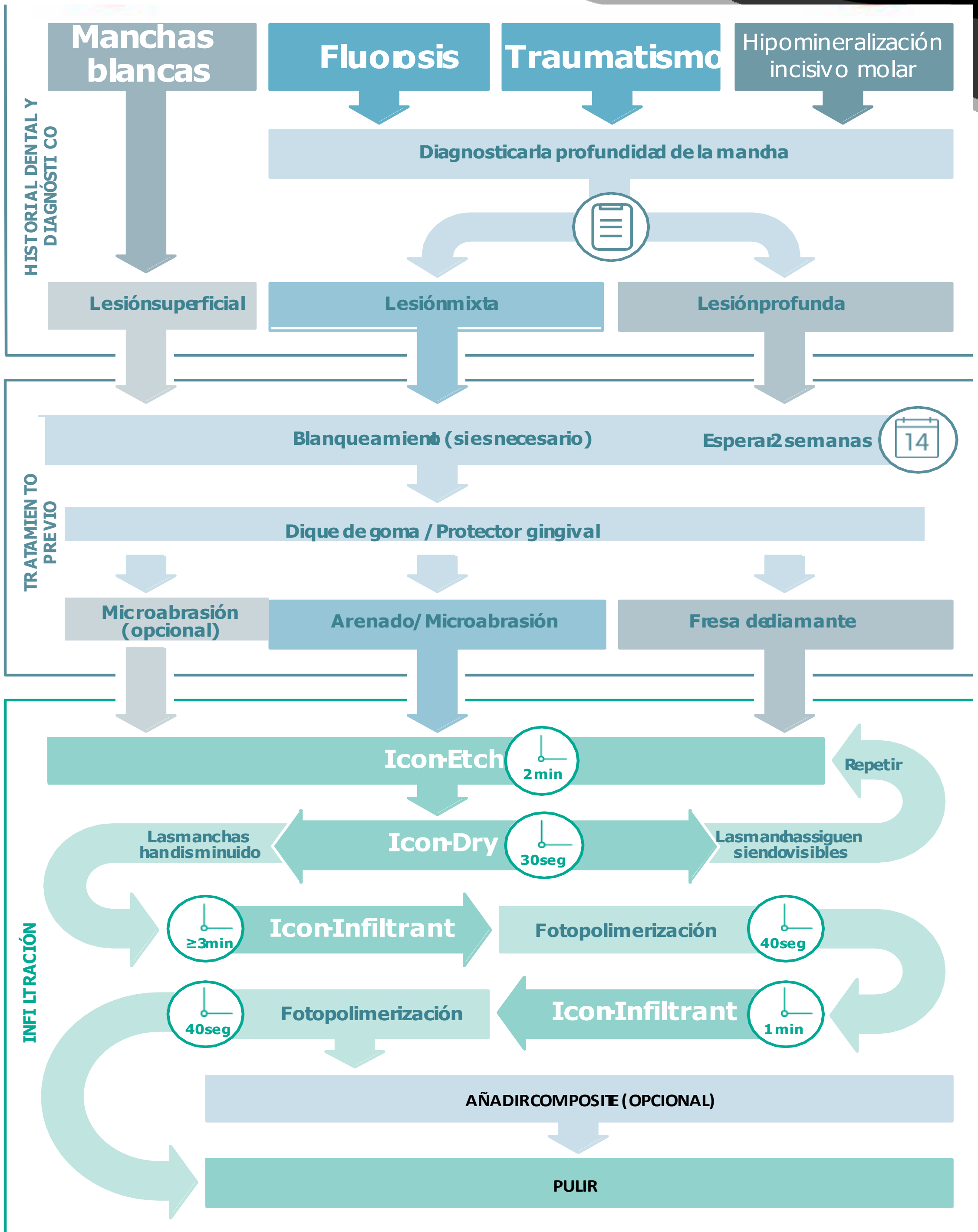



El esmalte es
translúcido y
la luz penetra
a través de él




Si hay lesión
cambia y adopta
un aspecto
blanquecino.



Al infiltrar se rellena
el tejido poroso,
igualando la refracción
y el aspecto
del esmalte sano

No necesita colores,
resalta el color natural

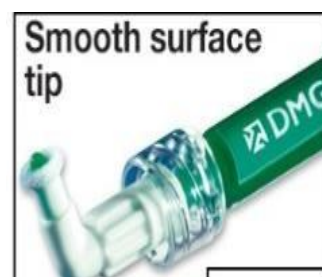

Icon vestibular dm22034

Contiene 2 unidades
de tratamiento

- 2 jer. de 0,45 ml icon etch
(clohidrico)
- 2 jer. de 0,45 ml
icon-dry (etanol)
- 2 jer. de 0,45 ml
icon-infiltrant
- 12 tips vestibulares
- 2 luer-lock-tips

~~PVP 220€~~

OFERTA 188 €

(24 piezas 7,80 € pieza)



DIAMOND EXCEL



1 jeringa 2 gr

~~16,85 €~~

OFERTA 12,97 €

**Solo composites, no
cerámicas**

Pasta de pulido de diamante micronizado (2 a 4 micras)

Brillo excepcional

Puede ser utilizada para todos los materiales
restauradores

Uso en clínica y laboratorio protésico

DISCOS DE FIELTRO

No dañan el
esmalte

Pulido y brillo de
composites y
cerámica



24 discos
(2 tamaños)
+ mandril

PVP 39 €

**+ Gratis
1 diamond
excell 2 g**





DIAMOND EXCEL ULTRAFINE

Pasta de pulido de diamante micronizado ultrafino
(0,5 micrones)

Brillo excepcional

**Solo composites, no
cerámicas**

**Puede ser utilizada para todos
los materiales restauradores**

Efecto tixotrópico, buen manejo y
no se va de la zona aplicada



Uso en clínica y
laboratorio protésico

1 jeringa 2 gr y punta

~~36,63 €~~

OFERTA 28,20 €



DENTAL ARROYO
SELECCION

Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com



ALLCEM VENEER

Cemento definitivo de carillas fotocurable

Sin aminas terciarias, **más estabilidad de color**

Fácil retirada del sobrante

Fluorescencia natural del diente

Carillas cerámicas y / o resina compuesta
de hasta 1.5 mm de grosor

A1-A2-A3-translúcido-
blanco opaco-e-bleachm

Jeringa de 2.5 g
+ 5 puntas ~~103,12€~~

51,56 €

ALLCEM VENEER MINI KIT

3 jeringas de 2,5 gr. En color A1-Owy trans +
3 jeringas try-in de 2 gr. en color A1-Ow-
trans. + ambar aps con 2 ml y puntas

~~360,84 €~~

216,51 €

ALLCEM TRY-IN

**Geles de prueba, try-in que imitan el color
del cemento ya polimerizado para conocer el
resultado antes del cementado**

Facilita la correcta posición y elección del color
fácil de eliminar después de lavar con agua

~~51,57 €~~

23,21 €




*Aroma
mentolado
jeringa de 2 gr*

CONDAC PORCELANA

Ácido fluorhídrico al 5% o al 10% para grabado
de porcelana

Disilicato de litio 20"

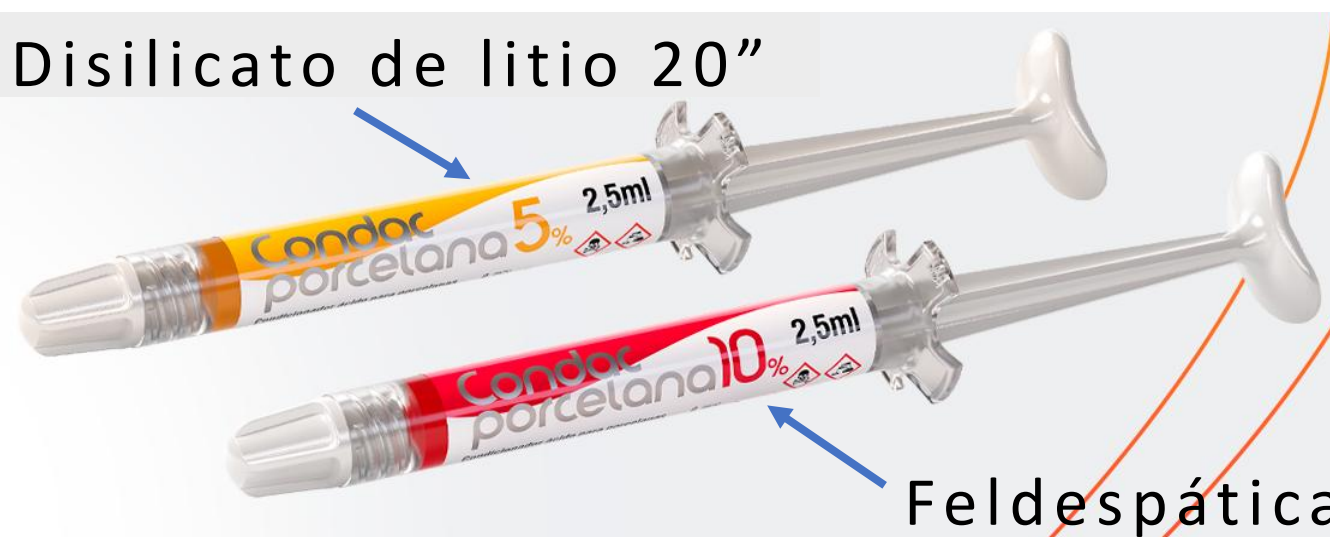

13,16 €

1 jeringa con 2,5 ml
y puntas

Feldespática (1minuto)

- ✓ Buena afinidad con agua: fácil retirada
- ✓ Posee color diferenciado: facilita el control de la aplicación
- ✓ Excelente consistencia: fácil aplicación, no escurre del punto de aplicación

SILANO



38 € 2 jeringas 1,2 ml
solución
monocomponente

*Restauraciones indirectas de porcelana antes de la
inserción grabado de porcelana o de antiguas
Restauraciones de composite con macrorrelleno antes de
realizar una adhesión y reparación intraoral.*

No mancha el composite ni la resina de fijación

Mayor fuerza adhesiva