



Ofertas válidas hasta el
30 de junio, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días



Cemento de resina definitivo universal

CRU SELECCION



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más cánulas

**Sin acido – sin adhesivo – sin coronas
altas – sin problemas de humedad –
sin bisfenol (Bis GMA)**

4 productos en 1

Cementa todos los materiales

Reconstruye muñones

Repara cerámicas

Caries de cuello (evita que “salten”)



CRU SELECCION

Cemento de resina definitivo universal Relleno nano



Jeringa doble de 7gr.

PROBLEMA



Las caries de
cuello "saltan con
facilidad"



SOLUCIÓN

Se adhiere mejor al
cuello, y al composite

Los cementos en polvo y liquido
pueden tener problemas de dosis
y de mezcla



Automezcla perfecta y
rápida

Pérdida de tiempo hasta que
fragua



Fraguado 40 segundos
con luz y 4 minutos sin luz

Con la humedad (barrillo
dentinario) pueden despegarse



Hidrofílico, si hay
humedad se adhiere mas

Dual, si no llega la luz, fragua solo

**Fraguado anaerobico (sin presencia de oxígeno)
no se desperdicia la última capa**

Autograbante, sin adhesivo (grabar sólo el esmalte)

**Libera fluor
Radiopaco**

Sin bisfenol (bis gma)

Ausencia de sensibilidad

INCOMPATIBLE CON LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN BIS GMA



**DENTAL ARROYO
SELECCION**



Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com

No usar adhesivo si hay retención adecuada



Ferulizaciones
Grabar esmalte
no abrasionado

No secar el diente,
contiene agua natural,
sólo removerla

Semipolimerizar uno
o dos segundos el
sobrante y quitar
con instrumento



Coronas y puentes capa
de 12 micras, no deja
coronas altas



Perno muñón colado



Puentes de maryland



Inlay / onlay



Mantenimiento de espacio



Refuerzo de puentes y prótesis



RECONSTRUCCIÓN DEL MUÑÓN.

Adhesión
química al
perno, esmalte
y dentina



Comportamiento
similar a la
dentina
natural

Para **todas** las superficies



Cerámica sobre Circonio



Circonio sobre metal

En circonio y cerámica, microabrasionar o grabar para crear mejor retención mecánica

PROTOCOLO PARA REPARAR CERÁMICA



- 1- Descartar que no sea un problema de oclusión
- 2- Asperizar la superficie para crear retenciones
- 3- Grabar con ácido fluorhídrico
- 4- Aplicar silano
- 5- Aplicar cement URC, al tener 12 micras de grosor, deja más espacio para el opaquer y el composite

Si se ha utilizado eugenol, quitar con ácido antes de poner otro producto

4 productos en 1

Cementar, reconstruir, reparar
cerámica y caries de cuello

CRU SELECDENT



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más cánulas

1 a 83€

2 a 79 €

4 a 72 €



CRU CEMENTO DE RESINA UNIVERSAL DEFINITIVO



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más cánulas




ARCO TRIOR MATERIAL PARA PRÓTESIS SIN METAL



2 Arcos a elegir
de 3,5 mm o de 5,5 mm

OFERTA 195 €

https://youtu.be/NErmy4d_s5U

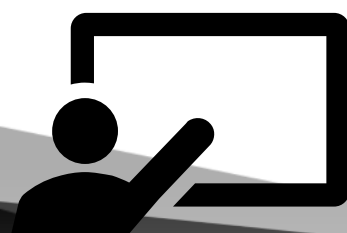


Ver vídeo



PERNOS SELECCION

Fibra de vidrio reforzada con resina

- ✓ Anatómicos modificables **no debilitan la raíz**
- ✓ Longitud adaptable, sin deshilacharse (sólo 4 tamaños)
- ✓ **No se parten** ni rotan
- ✓ Drills anatómicos, utilizables como Gates o Peesos, más robustos y para hueso

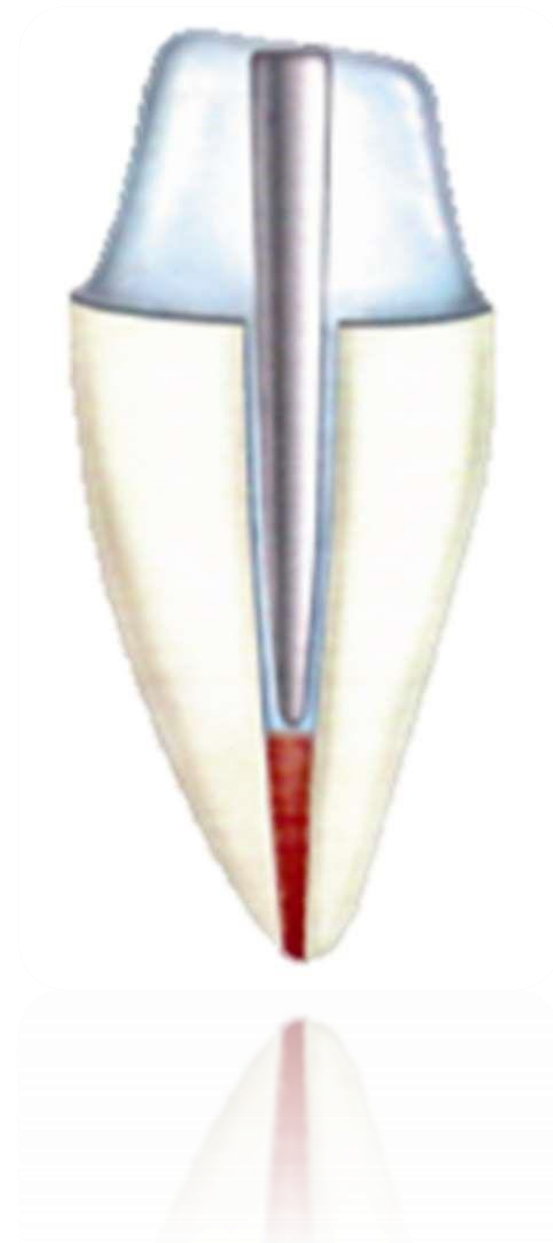

18,50 € drill



Kit 20 surtidos+drills

~~pvp 172€~~

Oferta 137€

Reposiciones:
Caja de 10 pernos

~~P.V.P. 49,50€~~

1 caja 38,50€

4 cajas 33,50€ /caja.

6 cajas 29,50€ /caja.

<https://www.youtube.com/watch?v=szeftT8zDAI>



Ver video



KIT PERNOS + CRU, CEMENTO DE RESINA UNIVERSAL

1 2 3 4



- 1 $\varnothing 1,2-0,5\text{mm}$
- 2 $\varnothing 1,4-0,7\text{mm}$
- 3 $\varnothing 1,6-0,9\text{mm}$
- 4 $\varnothing 1,8-1,1\text{mm}$

**No se
desilachan**

solo 4 tamaños

20 pernos surtidos
+ 4 drills



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más 10 cánulas

~~PVP 255 €~~

OFERTA 209 €





CEMENTO KDM IMPLANTOCEM

Cemento de fraguado dual
semipermanente para implantes



1 jeringa de 5 ml + 10 cánulas

Buena elasticidad y buen sellado
Fácil y cómodo de usar

51,38 €



CEMENTO KDM CROWN BOND

**Cemento provisional de óxido de zinc
(Libre de eugenol)**

No interfiere con otros productos



1 cartucho de 25 ml

Autopolimerizable

Muy fácil de usar en cementación provisional,
coronas, inlays, puentes y como **obturador
provisional**

51 €



DENTAL ARROYO
SELECCION

Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com



ALLCEM VENEER

Cemento definitivo de carillas fotocurable

Sin aminas terciarias, **más estabilidad de color**

Fácil retirada del sobrante

Fluorescencia natural del diente

Carillas cerámicas y / o resina compuesta
de hasta 1.5 mm de grosor

A1-A2-A3-translúcido-
blanco opaco-e-bleachm

Jeringa de 2.5 g
+ 5 puntas ~~103,12€~~

51,56 €

ALLCEM VENEER MINI KIT

3 jeringas de 2,5 gr. En color A1-Owy trans +
3 jeringas try-in de 2 gr. en color A1-Ow-
trans. + ambar aps con 2 ml y puntas

~~360,84 €~~

216,51 €

ALLCEM TRY-IN

**Geles de prueba, try-in que imitan el color
del cemento ya polimerizado para conocer el
resultado antes del cementado**

Facilita la correcta posición y elección del color
fácil de eliminar después de lavar con agua

~~51,57 €~~

23,21 €



*Aroma
mentolado
jeringa de 2 gr*



CEMENTO ORTHOCEM

Tixotrópico



1 jeringa con 4g


36,36€



Grabar con
ácido zona de
cementación



Aplicar
el adhesivo

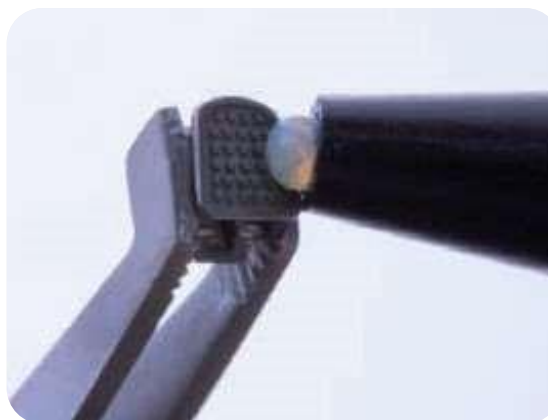

Aplicar
el cemento a la
base del brackets



Fotopolimerización

CEMENTO ORTHO BITE

Resina fotocurable para desoclusión
y cementación de bandas

No requiere
adhesivo,
solo ácido



39,98 €



DENTAL ARROYO
SELEDENT



Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseledent.com

FGM

Pack especial ORTODONCIA

Contenido del Pack

232136	ORTHOCEM Jer. 4G*	53,95 €	24,28 €
232136	ORTHOCEM Jer. 4G*	53,95 €	24,28 €
232134	AMBAR APS 6 ML	59,24 €	53,32 €
232137	ORTHO BITE azul jer 4 g	74,38 €	66,94 €
232223	CONDAC Jer. 3 x 2,5 g	12,49 €	11,24 €
232256	VITTRA APS unique Jer. 2G	34,17 €	30,75 €
233853C	LAMPARA WOODPECKER O-Light II inalámbrica	300,00 €	GRATIS
			290,12 €

*Este pack contiene 2 uds. de la referencia
232136 ORTHOCEM Jer. 4G




GRATIS



CONDAC PORCELANA

Ácido fluorhídrico al 5% o al 10% para grabado
de porcelana

Disilicato de litio 20"

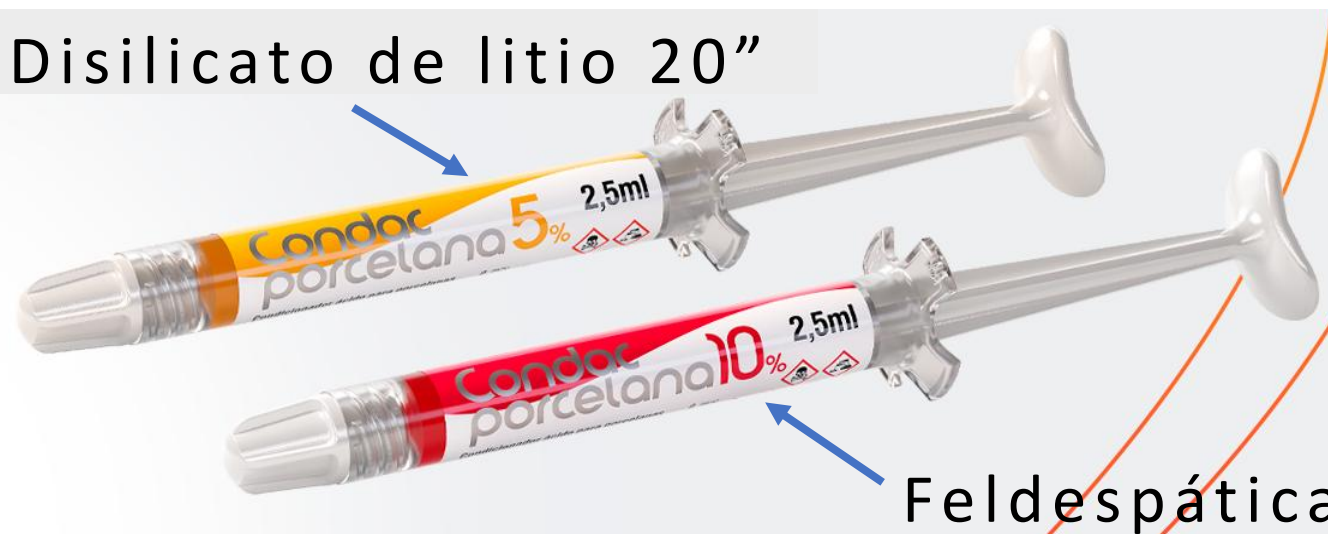

13,16 €

1 jeringa con 2,5 ml
y puntas

Feldespática (1minuto)

- ✓ Buena afinidad con agua: fácil retirada
- ✓ Posee color diferenciado: facilita el control de la aplicación
- ✓ Excelente consistencia: fácil aplicación, no escurre del punto de aplicación

SILANO



38 € 2 jeringas 1,2 ml
solución
monocomponente

*Restauraciones indirectas de porcelana antes de la
inserción grabado de porcelana o de antiguas
Restauraciones de composite con macrorrelleno antes de
realizar una adhesión y reparación intraoral.*

No mancha el composite ni la resina de fijación

Mayor fuerza adhesiva